 <b>Medi-market</b> medicine and medical equipment	תנאי הכנה נאותים בבית מרקחת : קבלת הזמנה, ייצור ובקרת איכות
נוהל זה בתוקף מתאריך: 24.12.18	נוהל מסי 20-05 (נספח מספר 2)
עמוד 1 מתוך 3	מהדורה : 02

4.54g

## הכנה רוקחית

יום רביעי 24 אפריל 2019

שם ההכנה :

### Cream G.P.B -


Gentamycin 0.16% & Prednisolone 0.5% & Lidocaine 2%

מס' יחידות לייצור	אצווה	מק"ט	שם ההכנה
75	V92404B/A	1857	G.P.B JAR 50ml
		185	G.P.B JAR 20ml
		18576	G.P.B TUB 50ml
		18563	G.P.B TUB 20ml
2	V92404B/A1	0547	G.P.B JAR 400ml


שם החומר	אצווה	תוקף	כמות (עבור 3Kg)	שקילה בפועל	חתימת מכין	חתימת בודק
Pow. Gentamycin	160728055	20/10/19	4.8gr	7.2gr	רוחם	רוחם
Pow. Prednisolone	156267/8	04/22	15gr	22.5gr	רוחם	רוחם
Pow. Lidocaine Base	16F21-Base 2324	04/21	60gr	90gr	רוחם	רוחם
Paraffin Oil	081854-E	08/21	300ml	450ml	רוחם	רוחם
Propylene Glycol	A018016	09/20	75ml	112.5ml	רוחם	רוחם
Cetostearyl Alcohol (ThaiOL)	1318021003-20559	07/20	50gr	75gr	רוחם	רוחם
Sodium Lauryl Sulphate (s.l.s)	23102419	12/21	3gr	4.5gr	רוחם	רוחם
Glyceryl Stearate (G.M.S)	1820641	11/19	120gr	120gr	רוחם	רוחם
Benzalqonium chloride	14724/A	02/20	3ml	4.5ml	רוחם	רוחם
Vaseline	WSP013	05/21	1000gr	1500gr	רוחם	רוחם
Distilled Water	71117		1200ml	1800ml	רוחם	רוחם

תוקף: חצי שנה

מתבסס על נוהל 132 משרד הבריאות

 <b>Medi-market</b> medicine and medical equipment	תנאי הכנה נאותים בבית מרקחת : קבלת הזמנה, ייצור ובקרת איכות
	נוהל מס' 20-05 (נספח מספר 2)
נוהל זה בתוקף מתאריך : 24.12.18	מהדורה : 02
עמוד 2 מתוך 3	

דוגמת מדבקה -



1857  
**G.P.B**  
cream  
50ml  
Gentamycin 0.16%  
Prednisolone 0.5%  
Lidocain 2%  
B:V92404B/A Exp:20/10/19

**הכנה רוקחית**

0547

**G.P.B cream**

Gentamycin 0.16%    חייב מרשם רופא    B:V92404B/A1  
 Prednisolone 0.5%    לשימוש וטרינרי בלבד    Exp:20.10.19  
 Lidocain 2%    לשימוש חיצוני בלבד    יצור: 24.04.18  
 400 ml    אינו מיועד לבע"ח למאכל אדם    Ro.St

בית מרקחת אי.אל.מדי-מרקט רחי הכדר 18, נתניה | טל' 09-8844453

**הכנה רוקחית**


0547

**G.P.B cream**

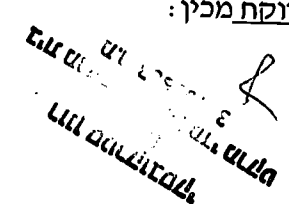
Gentamycin 0.16%    חייב מרשם רופא    B:V92404B/A  
 Prednisolone 0.5%    לשימוש וטרינרי בלבד    Exp:20.10.19  
 Lidocain 2%    לשימוש חיצוני בלבד    יצור: 24.04.18  
 50 ml    אינו מיועד לבע"ח למאכל אדם    Ro.St

בית מרקחת אי.אל.מדי-מרקט רחי הכדר 18, נתניה | טל' 09-8844453

חתימת בודק שני :

  
 סגן מנהל  
 ע-1590  
 אגף טוה

חתימת וחותמת רוקח מכין :

  
 סגן מנהל  
 ע-1590  
 אגף טוה

הוראות הכנה :

1. שקול במדוייק את כל חומרי הגלם
2. העבר לסיר תוך כדי חימום את המרכיבים האלה לפי סדר הופעתם : Glyceryl Stearate (G.M.S) ועליו הוסף Cetostearyl Alcohol (ThaiOL) ולבסוף הוסף Vaseline לפי המשקלים הנדרשים.
3. הוסף לסיר את נפח Paraffin Oil הנדרש. כאשר המוצקים עברו למצב צבירה נוזלי הסר את הסיר מהחימום.
4. הוסף לסיר את נפח Propylene Glycol הנדרש.
5. הוסף ל Distilled Water את נפח Benzalqonium chloride הנדרש.
6. הוסף בהדרגה תוך כדי ערבול ההכנה עם בלנדר ידני כ - 80% מנפח המים הנדרש.
7. הוסף את החומרים הפעילים : Pow. Prednisolone, Pow. Gentamycin Pow. Lidocaine. השלם את נפח המים הנדרש בהתאם למרקם שהתקבל.
8. הוסף Sodium Lauryl Sulphate (s.l.s) בהתאם לצורך על פי המרקם של הקרם שמתקבל
9. ערבב היטב וחלק בעזרת מזרק לצנצנות ו/או שפורפרות בהתאם להזמנה
10. ארוז את ההכנה (מדבקות+אריזה חיצונית).

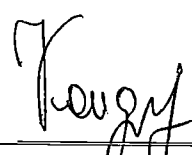
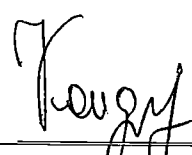


תנאי הכנה נאותים בבית מרקחת : קבלת הזמנה, ייצור ובקרת איכות

נוהל זה בתוקף מתאריך: 24.12.18	נוהל מס' 20-05 (נספח מספר 2)
עמוד 3 מתוך 3	מהדורה : 02

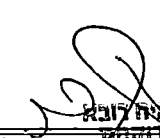
תוויות הכנה					
מספר מיכלים שצאת לפי נפח האצווה	מספר מדבקות שהודפסו	מס' מדבקות שהודבקו על המיכלים כולל מדבקת דוגמא	תוויות פסולות	תוויות עודפות	מאזן **/*
75/2	79/3	79	0	0	0
75/2	79/3	79	0	0	0

\*מאזן = מס' מדבקות שהודפסו - מס' מדבקות שהודבקו על המיכלים כולל מדבקת דוגמא - תוויות פסולות - תוויות עודפות. המאזן אמור להיות אפס

חתימה וחותמת המכין:  חתימת אחראי אריזות: 

נפח ההכנה 4.5kg נפח ההכנה בפועל 4.5kg ניצולת (באחוזים) 100%

11. העבר לעמדת רוקח משחרר

<p>12 סקירת מסמכים לצורך שחרור/פסילת ההכנה</p> <p><input type="checkbox"/> מסמכי ההכנה נסקרו ונמצאו תקינים כן לא</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> מראה ההכנה תקין (צלילות, ריח, צבע, מרקם, pH) כן לא</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> מאזן התוויות נסקר ונמצא תקין כן לא</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> נבדקה התאמה בין התווית למרשם הרופא ונמצאה תקינה כן לא</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> תנאי איחסון (הקף העיגול): (חדר, קירור 2-8, הקפאה 20-</p> <p><b>ההכנה משוחררת/ פסולה לניפוק **</b></p> <p>* סמן בעיגול את האופציה הנבחרת ** במקרה של פסילה - פתח דו"ח חריגה</p> <p>חתימה וחותמת אחראי שחרורים:  תאריך: 29.04.19</p>
--

13. הכנסה למלאי בית המרקחת  
מ.ר. 125170-3  
מדי מרקט