



**Medi-market**  
medicine and medical equipment

תנאי הכנה נאותים בבית מרקחת : קבלת הזמנה, ייצור ובקרת איכות

נוהל זה בתוקף מתאריך :  
24.12.18

נוהל מסי' 20-05 (נספח מספר 2)

עמוד 1 מתוך 3

מהדורה : 02

## הכנה רוקחית

יום שלישי 20 אוגוסט 2019

שם ההכנה :

**Cream C.P.B -**

**Chloramphenicol 3% & Prednisolone 0.5% & Lidocaine 2%**

92 - 50 ml  
24 - 50 ml  
36 - 80 ml


619

מצווה	מק"ט	שם ההכנה
V92008B/S1	1873	C.P.B JAR 50ml
V92008B/S2	778	C.P.B JAR 20ml
V92008B/S3	18733	C.P.B TUB 50ml
V92008B/S4	77856	C.P.B TUB 20ml

36 ✓

שם החומר	מצווה	תוקף	כמות (עבור 3Kg)	שקילה בפועל	חתימת מכין	חתימת בודק
Pow. Chloramphenicol	16212/B	9/21	90gr	180 gr		
Pow. Prednisolone	15660/A	4/22	15gr	30 gr		
Pow. Lidocaine	13666/Y	1/20	60gr	120 gr		
Paraffin Oil	04992/B	1/22	300ml	600 ml		
Propylene Glycol	11900/M	4/21	75ml	150 ml		
Cetostearyl Alcohol (ThaiOL)	03659	11/20	60gr 50gr	120 gr		
Sodium Lauryl Sulphate (s.l.s)	15864/A	8/21	8gr 3 gr	16 gr		
Glyceryl Stearate (G.M.S)	90844	10/20	130gr 120gr	260 gr		
Benzalqonium chloride	15350/F	11/20	3ml	6 ml		
Vaseline	2018/19	02/22	1200gr	2400 gr		
Distilled Water			750ml* 1000ml	1500 ml		

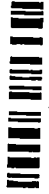
נסרקה

 <b>Medi-market</b> medicine and medical equipment	תנאי הכנה נאותים בבית מרקחת : קבלת הזמנה, ייצור ובקרת איכות
נוהל זה בתוקף מתאריך : 24.12.18	נוהל מס' 05-20 (נספח מספר 2)
עמוד 2 מתוך 3	מהדורה : 02

תוקף: חצי שנה

מתבסס על נוהל 132 משרד הבריאות

דוגמת מדבקה -

<p> <b>הכנה רוקחית</b>  <b>C.P.B. cream 50 ml</b>          Chloramphenicol 3%          Prednisolone 0.5%          Lidocaine 2%       </p> <p>         חייב מרשם רופא לשימוש וטרינרי בלבד          אינה מיועד לבע"ח למאכל אדם לשימוש חיצוני בלבד       </p> <p> <b>Medi-market</b>          B:V92008B/S1          Exp:19.02.20          יצור: 20.08.19          MU.HA.       </p> <p>         בית מרקחת אי.אל.מדי-מרקט   רח' הכדור 18, נתניה   טל' 09-8844453       </p> <p>           1873  <b>CPB cream 50ml</b>          B:V92008B/S1 Exp:19.02.20       </p> <p> <b>CPB cream 50ml</b>          B:V92008B/S1 Exp:19.02.20       </p>	<p> <b>הכנה רוקחית</b>  <b>C.P.B. cream 20 ml</b>          Chloramphenicol 3%          Prednisolone 0.5%          Lidocaine 2%       </p> <p>         חייב מרשם רופא לשימוש וטרינרי בלבד       </p> <p> <b>Medi-market</b>          B:V92008B/S1          Exp:19.02.20          יצור: 20.08.19          MU.HA.       </p> <p> <b>הכנה רוקחית</b>  <b>C.P.B. cream 50 ml</b>          Chloramphenicol 3%          Prednisolone 0.5%          Lidocaine 2%       </p> <p>         חייב מרשם רופא לשימוש וטרינרי בלבד       </p> <p> <b>Medi-market</b>          B:V92008B/S1          Exp:19.02.20          יצור: 20.08.19          MU.HA.       </p>
--	---

חתמת בודק שני:



חתימת וחותמת רוקח מכין:

חתום ו.א.א.א.  
 3-12229-6  
 חתום ו.א.א.א.

הוראות הכנה:

- שקול במדוייק את כל חומרי הגלם
- העבר לסיר תוך כדי חימום את המרכיבים האלה לפי סדר הופעתם: Glyceryl Stearate (G.M.S) ועליו הוסף Cetostearyl Alcohol (ThaiOL) ולבסוף הוסף Vaseline לפי המשקלים הנדרשים.
- הוסף לסיר את נפח Paraffin Oil הנדרש. כאשר המוצקים עברו למצב צבירה נוזלי הסר את הסיר מהחימום.
- הוסף לסיר את נפח Propylene Glycol הנדרש.
- הוסף ל Distilled Water את נפח Benzalqonium chloride הנדרש.
- הוסף בהדרגה תוך כדי ערבול ההכנה עם בלנדר ידני כ - 80% מנפח המים הנדרש.
- הוסף את החומרים הפעילים: Pow. Prednisolone, Pow. Chloramphenicol Pow. Lidocaine. השלם את נפח המים הנדרש בהתאם למרקם שהתקבל.
- הוסף Sodium Lauryl Sulphate (s.l.s) בהתאם לצורך על פי המרקם של הקרם שמתקבל
- ערבב היטב וחלק בעזרת מזרק לצנצנות ואו שפורפרות בהתאם להזמנה
- ארוז את ההכנה (מדבקות+אריזה חיצונית).