

הכנה רוקחית

יום שני 26 אוגוסט 2019

שם ההכנה:

Gabapentin 100mg/cap

אצווה מספר: V926081

ברקוד: 10036

שם החומר	אצווה	תוקף	פורמולה (עבור 100 קפסולות)	שקילה בפועל	חתימת מכין	חתימת בוחק
Gabapentin pow.	411118	11.20	25cap	25cap	Bal	החתימה
Pow. LACTOSE	155121/14	05.22	AD 17 gr	Ad 17	Bal	החתימה
קפסולה מס' 3			קפסולה מס' 3			החתימה

תוקף: חצי שנה

מתבסס על נוהל 132 משרד הבריאות


דוגמת מדבקה -

חתימת וחותמת רוקח

מכין Bal

חתימת בודק שני:

0850580
מספר זיהוי

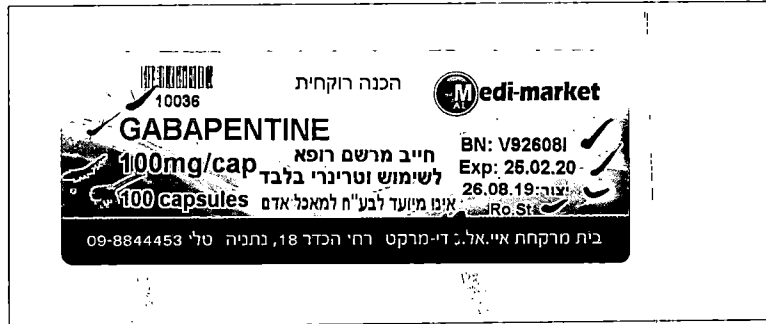

הוראת הכנה:

- ישקול במדויק את Gabapentin
- ישקול במדויק והשלים באמצעות אבקת LACTOSE עד למשקל

משקל Lactose (AD...)	גודל קפסולה (על פי מספרן)
60 גרם	00
50 גרם	0
30 גרם	1
22.5 גרם	2
17.5 גרם	3
13 גרם	4

3. ערבב את האבקות באמצעות מכתש ועלי כמספר דקות עד לקבלת תערובת הומוגנית
4. פזר את האבקה לאחר הערבוב על מכשיר להכנת קפסולות בצורה אחידה.
5. ארוז את ההכנה (מדבקות+אריזה חיצונית).

תוויות הכנה					
מספר מיכלים שעתידים לצאת לפי נפת האצווה	מספר מדבקות שהודפסו	מס' מדבקות שהודבקו על המיכלים כולל מדבקות דוגמא	תוויות פסולות	תוויות עודפות	מאזן **/*
1	2	1+1	0	0	0

*מאזן = מס' מדבקות שהודפסו - מס' מדבקות שהודבקו על המיכלים כולל מדבקות דוגמא - תוויות פסולות - תוויות עודפות. המאזן אמור להיות אפס

חתימה וחותמת המכין: Beit חתימת אחראי אריות: Beit

מס' תאריך: 3-108505 ל"ט
 מל"ט
 מל"ט
 מל"ט
 מל"ט
 מל"ט

כמות קפסולות בהכנה 100 cap כמות קפסולות בפועל 100 cap ניצולת (באחוזים) 100%

6. העבר לעמדת רוקח משחרר

7	סקירת מסמכים לצורך שחרור/פסילת ההכנה
<input checked="" type="checkbox"/>	מסמכי ההכנה נסקרו ונמצאו תקינים כן לא
<input checked="" type="checkbox"/>	מראה ההכנה תקין כן לא
<input checked="" type="checkbox"/>	מאזן התוויות נסקר ונמצא תקין כן לא
<input checked="" type="checkbox"/>	נבדקה התאמה בין התוויות למרשם הרופא ונמצאה תקינה כן לא
<input checked="" type="checkbox"/>	תנאי איחסין (הקף העיגול): חדר, קירור 2-8, הקפאה 20-
	ההכנה משוחררת/ פסולה לניפוק **
	* סמן בעיגול את האופציה הנבחרת
	** במקרה של פסילה - פתח דו"ח חריגה
	חתימה וחותמת אחראי שחרורים:

תאריך: 26/8/19

מס' תאריך: 3-108505 ל"ט
 מל"ט
 מל"ט
 מל"ט
 מל"ט

8. הכנסה למלאי בית המרקחת