


| | |
|---|---|
|  Medi-market medicine and medical equipment | תנאי הכנה נאותים בבית מרקחת : קבלת הזמנה, ייצור ובקרת איכות |
| נוהל זה בתוקף מתאריך: 24.12.18 | נוהל מסי 20-05 (נספח מספר 2) |
| עמוד 1 מתוך 2 | מהדורה : 02 |

400 Caps

הכנה רוקחית

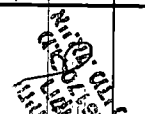

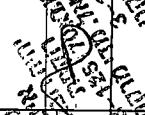
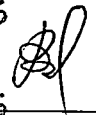
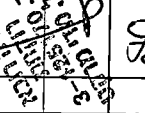

יום שני 03 יוני 2019

שם ההכנה:

Sulfadiazine-Na 400mg+Trimethoprim 80mg/cap

אצווה מספר : V90306F

ברקוד: 8368

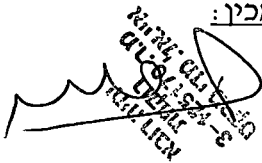
| שם החומר | פורמולה (עבור 100 קפסולות) | אצווה | תוקף | שקילה בפועל | חתימת מכין | חתימת בודק |
|-------------------|----------------------------|----------|------|-------------|---|---|
| Sulfadiazine - Na | 40 gr | 1501881f | 5/22 | 80gr |  |  |
| Trimethoprim | 8 gr | 15566014 | 9/22 | 16gr |  |  |
| Pow. LACTOSE | AD 50 gr | N/A | N/A | N/A |  |  |
| קפסולה מס' 0 | קפסולה מס' 0 | | | | | |

תוקף: חצי שנה

מתבסס על נוהל 132 משרד הבריאות

דוגמת מדבקה -

חתימת וחותמת רוקח
מכין:



חתימת בודק שני:





8368 הכנה רוקחית

Sulfadiazine 400mg

Trimethoprim 80mg

100 Capsules


חייב מרשם רופא לשימוש וטרינרי בלבד אינו מיועד לבע"ח למאכל אדם

Medi-market
B:V90306F
Exp:02.12.19
03.08.19 יצור: Ru.Ye.

בית מרקחת אי.אל.מדי-מרקט! רח' הכדר 18, נתניה! טל' 09-8844453

הוראות הכנה:

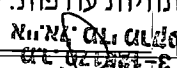
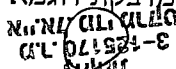
- שקול במדוייק את האבקות
- שקול במדוייק והשלם באמצעות אבקת LACTOSE עד למשקל על פי הטבלה

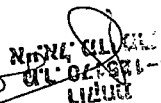
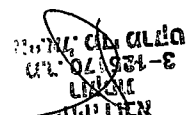
| | |
|---|---|
|  Medi-market medicine and medical equipment | תנאי הכנה נאותים בבית מרקחת : קבלת הזמנה, ייצור ובקרת איכות |
| נוהל זה בתוקף מתאריך: 24.12.18 | נוהל מסי' 20-05 (נספח מספר 2) |
| עמוד 2 מתוך 2 | מהדורה : 02 |

| משקל Lactose (AD...) | גודל קפסולה (על פי מספרן) |
|----------------------|---------------------------|
| 60 גרם | 00 |
| 50 גרם | 0 |
| 30 גרם | 1 |
| 22.5 גרם | 2 |
| 17.5 גרם | 3 |
| 13 גרם | 4 |

- ערבב את האבקות באמצעות מכתש ועלי כמספר דקות עד לקבלת תערובת הומוגנית
- פזר את האבקה לאחר הערבוב על מכשיר להכנת קפסולות בצורה אחידה.
- ארוז את ההכנה (מדבקות+אריזה חיצונית).

| תוויות הכנה | | | | | |
|---|---------------------|--|---------------|---------------|----------|
| מספר מיכלים שעתידים לצאת לפי נפח האצווה | מספר מדבקות שהודפסו | מסי' מדבקות שהודבקו על המיכלים כולל מדבקות דוגמא | תוויות פסולות | תוויות עודפות | מאזן **/ |
| 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |

*מאזן = מסי' מדבקות שהודפסו - מסי' מדבקות שהודבקו על המיכלים כולל מדבקות דוגמא - תוויות פסולות - תוויות עודפות. המאזן אמור להיות אפס חתימה וחותמת המכשיר:  חתימת אחראי אריזות: 


498


כמות קפסולות בהכנה 400
כמות קפסולות בפועל 398 (ניצולת/באחוזים) 1
6. העבר לעמדת רוקח משחרר

7 סקירת מסמכים לצורך שחרור/פסילת ההכנה

מסמכי ההכנה נסקרו ונמצאו תקינים כן לא

מראה ההכנה תקין כן לא

מאזן התוויות נסקר ונמצא תקין כן לא

נבדקה התאמה בין התוויות למרשם הרופא ונמצאה תקינה כן לא

תנאי אריזה (הקף העיגול): חזר, קירור 2-8, הקפאה 20-

ההכנה משוחררת/ פסולה לניפוק **

* סמן בעיגול את האופציה הנבחרת
** במקרה של פסילה - פתח דו"ח חריגה

חתימה וחותמת אחראי שחרורים:  תאריך: _____